



# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ametystová matrace Bio-Mat Professional  
Ametystová matrace Bio-Mat Queen  
Ametystová matrace Bio-Mat Single  
Turmalínová a jadeitová matrace Bio-Mat Queen  
Jadeitová matrace Bio-Mat Single  
Ametystová & turmalínová matrace Mini-Mat



Richway International, Inc  
[www.richwayusa.com](http://www.richwayusa.com)


1750 KALAKAUA ST 103 HONOLULU, HI 96826, TEL: (808)589-2800, FAX (808)597-1651

## OVLÁDAČ (ZÁKLADNÍ VELIKOST)

UPOZORNĚNÍ: PROHLÉDNĚTE SI PROSÍM OBRÁZEK A SEZNAMTE SE S JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI.

Ovládač k matraci <sup>TM</sup>Bio-Mat<sub>box</sub> (základní velikost) společnosti RichWay International. Ine je vybaven vysoce pokročilým IC čipem, který zcela odstraní elektromagnetické vlny a vlny podzemních vodních žil.

Ovládač s dotykový ovládacím systémem má velmi praktické funkce.

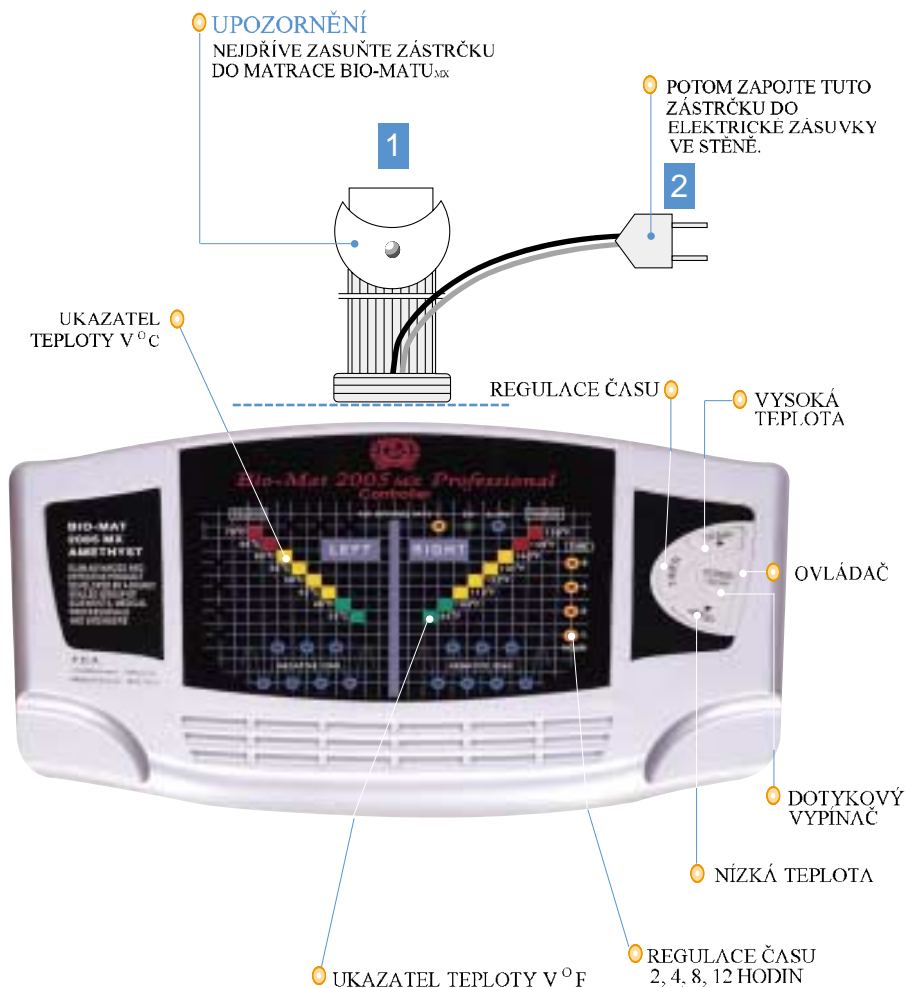

<sup>TM</sup>Ametystová matrace Bio-Mat Professional

<sup>TM</sup>Ametystová matrace Bio-Mat Single <sup>TM</sup>Jadeitová  
matrace Bio-Mat Single

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Rozměry amethystové matrace Mini-Mat	850 x 330mm / 33" x 17"
Čistá hmotnost	3,8kg
Příkon	100W



Napětí	AC 100
Amethystová složka	1,2kg
Turmalínová složka	1,0kg
Přírodní infračervené paprsky a záporné ionty.	

## OVLÁDAČ (MINI VELIKOST)

UPOZORNĚNÍ: PROHLÉDNĚTE SI PROSÍM OBRÁZEK A SEZNAMTE SE S JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI. Ovladač k matraci <sup>TM</sup>Bio-Mat<sub>mx</sub> (MINI velikost) společnosti RichWay International, Inc je vybaven vysoce pokrokovým IC čipem, který zcela odstraní elektromagnetické vlny a vlny podzemních vodních žil.

### UPOZORNĚNÍ

NEJDŘÍVE ZASUŇTE ZÁSTRČKU DO  
MATRACE <sup>TM</sup>BIO-MATU<sub>MX</sub>

POTOM ZAPOJTE TUTO  
ZÁSTRČKU DO  
ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY VE  
STĚNĚ.

OVLÁDAČ PRO  
NASTAVENÍ TEPLoty  
MINIMUM 35°C  
MAXIMUM 70°C

DISPLEJ VYPÍNAČE

DISPLEJ VYPÍNAČE  
TEPLoty

## OVLÁDAČ (KRÁLOVSKÁ VELIKOST)

UPOZORNĚNÍ: PROHLÉDNĚTE SI PROSÍM OBRÁZEK A SEZNAMTE SE S JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI.

Ovládač k matraci <sup>TM</sup>Bio-Mat<sub>box</sub> (královská velikost) společnosti RichWay International, Inc je vybaven vysoce pokrokovým IC čipem, který zcela odstraní elektromagnetické vlny a vlny podzemních vodních žil.

Ovládač s dotykový ovládacím systémem má velmi praktické funkce.

### UPOZORNĚNÍ

NEJDŘÍVE ZASUŇTE ZÁSTRČKU DO  
MATRACE <sup>TM</sup>Bio-Mat<sub>box</sub>

ZAPOJTE TUTO  
ZÁSTRČKU DO  
ELEKTRICKE ZÁSUVKY  
VE STĚNĚ.

UKAZATEL  
TEPLoty V °C

LEVÁ STRANA:  
VYSOKÁ  
TEPLOTA

LEVÁ  
STRANA:  
DOTYK  
OVÝ  
VYPÍŇ  
AČ

LEVÁ STRANA: OVLÁDAČ

LEVÁ STRANA:  
NÍZKÁ TEPLOTA

LEVÁ STRANA:  
ZAPNOUT

PRAVÁ STRANA:  
ZAPNOUT

UKAZATEL  
TEPLoty V °F

REGULACE ČASU  
2, 4, 8, 12 HODIN

PRAVÁ  
STRANA:  
OVLÁDAČ



<sup>TM</sup>Ametystová matrace Bio-Mat Queen

<sup>TM</sup>Turmalínová a jadeitová matrace Bio-Mat Queen

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM MATRACE <sup>TM</sup>BIO-MAT<sub>MX</sub> SI PROSÍM PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY.

### PŘEČÍST ZE VŠEHO NEJDŘÍV

- 1 Nevystavujte tento výrobek dešti ani vlhku, čímž snížíte riziko požáru nebo elektrického šoku.
- 2 Pokud se spustí alarm nebo pokud objevíte kouř, okamžitě výrobek vypněte a vytáhněte kabel ze zásuvky. Požádejte o pomoc vašeho dodavatele a/nebo kancelář společnosti.
- 3 Nepokládejte nebo neumísťujte tento výrobek blízko zdrojů tepla nebo magnetických polí, jako jsou radiátory, tepelné mřížky, sporáky, televizory nebo zmagnetizované předměty.

### OCHRANA ENERGETICKÉHO ZDROJE

Vaše matrace <sup>TM</sup>Bio-Mat<sub>MX</sub> má polarizovanou zástrčku (jeden kolík je širší než ten druhý). V rámci bezpečnosti lze zástrčku vsunout do polarizované zásuvky jen v jedné poloze. Pokud zástrčka nezapadne plně do polarizované zásuvky, zástrčku otočte. Pokud to ani poté nepůjde, nesnažte se dále zástrčku zasunovat, ale obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Pokud musíte z jakéhokoli důvodu výrobek vrátit, kontaktujte zákaznické centrum a vyžádejte si autorizační kód.

### NÁHRADNÍ DÍLY

Náhradní díly můžete objednat na telefonním čísle našeho zákaznického centra 1-808-589-2802, a to od pondělí do pátku mezi 9:00 a 18:00 hodinou havajského času (kromě svátků). Pomůžeme vám, když si před telefonátem připravíte následující informace:

**MODELOVÉ ČÍSLO výrobku (Single, Queen, BMP nebo Mini).**  
**ČÍSLO OBJEDNÁVKY.**

**Datum zakoupení.**

**Jméno žadatele.**

### BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

**ČASOVÝ SPÍNAČ:** Slouží k nastavení doby, po kterou chcete matraci používat. Při stisknutí tlačítka Timer se světlo kontrolky změní vždy podle doby nastavení.

**EMI (Electromagnetic Interception):** Zachycuje škodlivé elektromagnetické vlny.

**UKAZATEL TEPLoty:** Pokud změníte nastavení teploty, kontrolka se rozsvítí a zůstane rozsvícená.

**ALARM:** Tato kontrolka se rozsvítí v případě poruchy. obraťte se prosím na prodejce.

**™BIO-MAT<sub>MX</sub>**


## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – NEZNIČIT

*(TUTO PŘÍRUČKU UCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POTŘEBU)*

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM MATRACE BIO-MAT<sub>MX</sub> SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ DULEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.**

Před prvním použitím Bio-Matu<sub>MX</sub> si přečtete všechny pokyny obsažené v této příručce. Majitel nese zodpovědnost za to, aby byli všichni uživatelé Bio-Matu<sub>MX</sub> dostatečně informováni o všech bezpečnostních opatřeních. Umístěte Bio-Mat<sub>MX</sub> na rovný povrch na podložku, aby se zabránilo poškození postele. Bio-Mat<sub>MX</sub> skladujte v uzavřených prostorech a chráňte před vlhkem a prachem. Veškeré opotřebované součásti ihned vyměňte. Bio-Mat<sub>MX</sub> je určen pouze k domácímu použití.

Nepoužívejte Bio-Mat<sub>MX</sub> v komerčním, pronajatém nebo průmyslovém prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 12-ti let a zvířat.

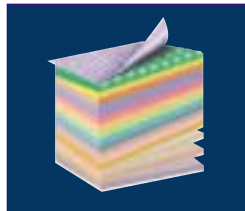

### EXTERIOR DIMENSIONS

Královská velikost	1400 x 2002mm / 55.11" x 77.81"
Základní velikost	900 x 2002mm / 35.43" x 77.81"
BMP velikost	750 x 2002mm / 31.91" x 77.81"
Čistá hmotnost	Královská 23kg bez ovládače
Čistá hmotnost	Základní 15kg bez ovládače
Čistá hmotnost	BMP bez ovládače 13kg
Zachycení elektromagnetického záření	Automaticky

### UPOZORNĚNÍ

**PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POPÁLENIN, ELEKTRICKÉHO ŠOKU, POŽÁRU A ÚRAZU JE NUTNÉ, ABY SE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU DODRŽOVALY NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.**

1. PŘED POUŽITÍM MODELŮ RII-S1/RII-Q2 SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
2. Majitel nese zodpovědnost za to, aby byli všichni uživatelé <sup>™</sup>Bio-Matu<sub>MX</sub> dostatečně informováni o všech bezpečnostních opatřeních.
3. Umístěte <sup>™</sup>Bio-Mat<sub>MX</sub> na rovný povrch, jako je postel nebo podložka, aby se zabránilo poškození výrobku. Skladujte v uzavřených prostorech, chráňte před vlhkem a prachem.
4. <sup>™</sup>Bio-Mat<sub>MX</sub> obsahuje snímatelnou podložku. Matraci bez podložky nepoužívejte. Teplota zůstane stabilní, když bude <sup>™</sup>Bio-Mat<sub>MX</sub> po celou dobu používání přikrytý prostěradlem, pokrývkou nebo jinými lůžkovinami z přírodních vláken.
5. Nepoužívejte na částech těla, kde je pokožka znečitlivělá. K popáleninám může dojít i ohledu na nastavení. Často svou pokožku kontrolujte, aby se neobjevily popáleniny nebo puchýře.
6. K upevnění podložky nepoužívejte spínací špendlík ani jiné kovové předměty.
7. Na podložce neskákejte, nestůjte, netlačte na ni a neumísťujte na ni těžké předměty.
8. Tuto podložku nikdy neumísťujte vedle elektrických kabelů, kontrolní krabičky nebo vedle jejich konektorů pro matraci. **NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÝ KABEL JAKO DRŽADLO.**
9. Tuto podložku nepoužívejte zároveň s olejíčky, balzámy či mastmi, které obsahují přísady produkující teplo. Může dojít k popálení pokožky.
10. Tuto podložku používejte pouze s vhodným napětím (110 nebo 220 voltů střídavého proudu). Pokud podložku nepoužíváte, tak ji vypněte, nebo ji vytáhněte ze zásuvky, pokud ji nepoužíváte po delší dobu.

11. S podložkou si nijak nehrajte. Pokud z nějakého důvodu poduška uspokojivě nefunguje, vraťte ji do kanceláře společnosti.
12. Podložku ani ovládač nenamáčejte. Čistíte vlhkým hadříkem.
13. K čištění podložky a ovládače nepoužívejte žádné čisticí prostředky, rozpouštědla nebo hořlavé látky. **NEČISTĚTE CHEMICKY.**
14. Podložku uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat, pokud jsou bez dozoru.
15. **TYTO POKYNY SI ŘÁDNĚ UCHOVEJTE.**



Rozměry polštáře	480 x 300 x 120mm/ 19"x2"x4.3"
Čistá hmotnost	2.7kg
Hmotnost amethystové složky	0.7kg
Hmotnost turmalínové složky	0.4kg
Polštář z elastické polyuretanové paměťové pěny	


## OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost RichWay International, Inc. garantuje mechanickou a elektrickou nezávadnost tohoto výrobku po dobu tří let od data zakoupení.

Naše zodpovědnost v rámci záruční doby je omezena na opravu či výměnu tohoto výrobku, které se odvíjí od názoru výrobce.

Společnost RichWay International, Inc. nenese zodpovědnost za žádné náhodné nebo následné škody, vzniklé jako důsledek zanedbání nebo špatného použití výrobku, použití nevhodného napětí/proudu nebo použití v rozporu s provozními pokyny. Demontáž, oprava nebo úprava jakoukoli jinou osobou, než jsou osoby z autorizovaných oprav, jsou přísně zakázány.

## RichWay International, Inc. Rozměry matrace <sup>TM</sup>BIO-MAT<sub>MX</sub>

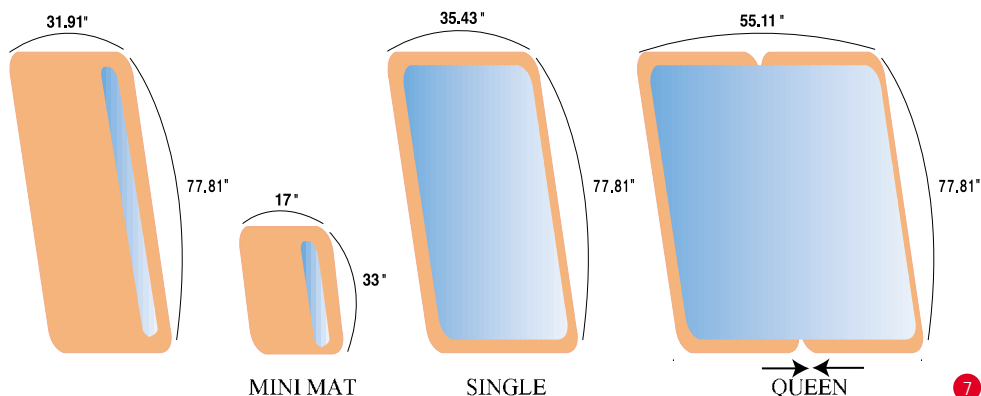

# SÍLA AMETYSTU

Před prvním použitím této ametystové matrace <sup>TM</sup>Bio-Mat<sub>MX</sub> si přečtete všechna bezpečnostní opatření a všechny pokyny v této příručce. Příručku si uchovejte pro budoucí potřebu.



## VŠEOBECNÉ POKYNY PRO MATRACI <sup>TM</sup>BIO-MAT<sub>MX</sub>

- 1 Zasuňte bílou přípojku ovládače do <sup>TM</sup>Bio-Matu<sub>MX</sub> (KRÁLOVSKÁ VELIKOST: L→L / R→R).
- 2 Zapojte elektrickou zástrčku ovládače to vývodu ve stěně nebo do elektrické zásuvky.
- 3 Zapněte bezpečnostní spínač (Safety Switch) ovládacího panelu zmáčknutím tlačítka, které je umístěné na pravé straně panelu.
- 4 <sup>TM</sup>Bio-Mat<sub>MX</sub> zapněte pomocí tlačítka Power.  
*Pokud jste provedli všechny výše uvedené kroky, ale matrace není zapnutá, znovu opakujte kroky 1 až 4.*
- 5 Temperature up/down (Regulace teploty nahoru/dolů): Nastaví požadovanou teplotu <sup>TM</sup>Bio-Matu<sub>MX</sub>.  
Při zmáčknutí tlačítka se budou světelné kontrolky pohybovat nahoru a dolů.
- 6 TIMER (Časový spínač): Nastaví dobu použití <sup>TM</sup>Bio-Matu<sub>MX</sub>.  
Při stisknutí tohoto tlačítka se světlo kontrolky změní vždy podle doby nastavení.  
EMI (Electromagnetic Interception): Shromažďuje škodlivé elektromagnetické vlny a vlny podzemních vodních žil, které by jinak matrace <sup>TM</sup>Bio-Mat<sub>MX</sub> vyzařovala.  
Tato kontrolka se rozsvítí a zůstane rozsvícená.  
TEMPERATURE INDICATOR (Ukazatel teploty): Tato kontrolka se rozsvítí a zůstane rozsvícená, když měníte nastavení teploty.  
ALARM: Tato kontrolka se rozsvítí v případě poruchy. obraťte se prosím na prodejce.

## TERAPEUTICKÁ DOPORUČENÍ

NEPOUŽÍVEJTE NASTAVENÍ NA VYSOKOU TEPLITU K CELONOČNÍMU SPÁNKU.

Děti, diabetici, postižení nebo lidé paralyzovaní by měli být po celou dobu používání matrace monitorováni. Nikdy nenastavujte vysoké teploty u dětí a u těhotných nebo kojících žen.

U nemluvnat se vyvarujte jakékoliv teploty.

Vysoké teploty okolo 65-70°C můžete používat pouze 20-60 minut denně na uvolnění bolesti kloubů a stresu nebo jako relaxační saunu/detoxikaci.

Nízké nastavení okolo 35-40°C můžete používat k dosažení kvalitního spánku nebo bez nastavení teploty (matrace je pouze zapnutá) můžete využívat účinku chladných a osvěžujících záporných iontů.